



クラプロックス

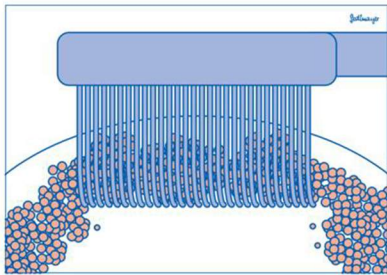


クラプロックスのCSシリーズは、一般的な歯ブラシの最大10倍もの超高密度毛により効果的かつ徹底的にプラークを取り除きます。

一般的な歯ブラシ

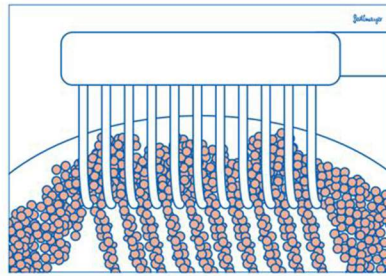


一般的な歯ブラシの毛束は500~800本程度です。上図のように毛束と毛束の間にプラークが残ることがあり、効率的にプラーク除去が出来ないことがあります。

CPSプライム (クラプロックス歯間ブラシ)

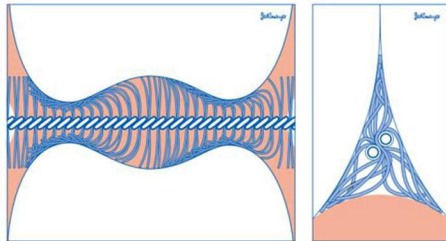


CPSプライムは完全に歯間の溝を埋め、優しく効果的にすべての歯間と歯頸部から歯垢を除去します。

毛の短い歯間ブラシ

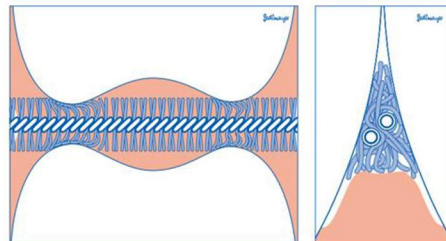


短すぎる毛の歯間ブラシは効果的に隙間を埋めることができないので、効果があってもわずかです。

1. IAPプライムを使用して患者さんの歯間空隙の大きさのカラーを決定し、対応するCPSプライム歯間ブラシを選択します。

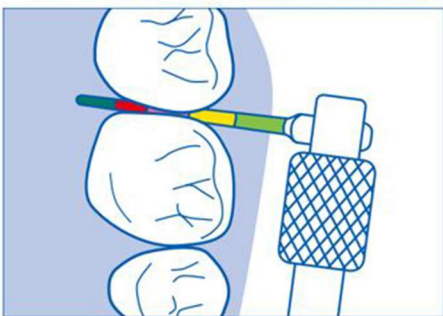

2. CPSプライムをホルダーに取り付け、歯間部を清掃します。

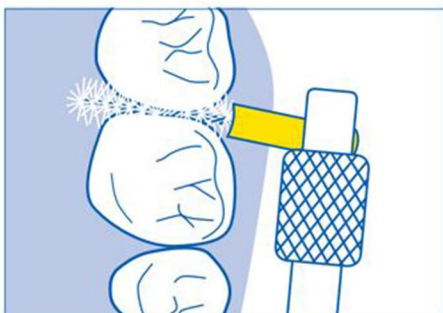

3. 色分けとIACチャートがあるので、歯間部のケアにCPSプライムを選択することができます。

CURAPROX

Name | Nom | Name

Nächste Kausultion | Prochain Rendez-vous | Next appointment:

CPS prime	Color
CPS 06	Green
CPS 07	Red
CPS 08	Pink
CPS 09	Yellow
CPS 011	Light Green

Handwritten note: **CPS 07** (with red arrows pointing to teeth 16, 17, and 18)

SWISS PREMIUM ORAL CARE